

步行車

Symphony Slim Box

[操作說明]

非常感謝您購買我們的產品

使用前請務必閱讀本使用說明書，閱讀後請妥善保管。將本產品轉交給他人時，請務必同時轉交本說明書。

目 錄

- 在使用本產品前，請告知您的護理經理或福利設備專家顧問您的身體狀況和狀況。
- 如果您擔心單獨使用本產品，請盡可能在同伴的協助下使用。
- 如果您擔心自己的身體狀況，請聯絡您的零售商、護理經理或福利設備專家顧問。

警告 / 注意	1~2
各部分名稱	3
如何展開車身	3
車身折疊法	4
手煞車的操作方法	4
停車煞車的操作方法	4
如何調整手把高度	5
座椅的使用方法	5
放置購物籃的方法	5
如何調整煞車	6
如何操作三向腳輪	6
如何收納雨傘和手杖	6
保固書	7

如果產品出現問題，請先聯絡購買商店。

英屬開曼島群商勝邦福樂智股份有限公司
台灣分公司 ☎ 02-2986-0551

為了安全使用本產品，請在使用前仔細閱讀本使用說明書。
請在使用前了解這一點。

為了防止事故和故障，請務必遵守以下事項。

警告事項 這可能會導致跌倒等嚴重事故。

- 請勿在公車、火車、手扶梯或樓梯上使用。
- 在雨、雪、冰等濕滑的地方要小心。
- 在交通繁忙、擁擠的地方或夜間使用本產品時請小心。
- 在溝渠、斜坡、道路等有階梯的地方騎行時要小心。
- 請勿在車輪抬起的情況下使用。
- 穿越鐵路道口時，請注意階梯。
特別是當警報響起時，驚慌失措、摔倒或車輪卡在溝裡是非常危險的，因此我們建議您與同伴一起過馬路。
- 請正確組裝、調整車身。
- 使用前請確保車身已完全組裝。
- 切勿在車身折疊的情況下使用本產品。
- 請勿用一隻手推動車身。
- 確保手把的高度調整零件（左、右）已固定。
- 如果靠在車把上、懸掛行李或以其他方式施加過大的負載，車身可能會向前移動並導致車輛翻倒。
- 請勿將其用作踏腳凳。
- 請勿坐在斜坡等斜坡上。
- 請勿在室外放置籃子的情況下使用本產品。
- 坐下時，請務必確保停車擋塊蓋住左右輪並且車輛不會移動。
- 請勿坐在座位以外的地方。
- 請勿在座位上坐得太淺。
- 從座位起身時，請確保車身不動，然後緩慢起身。
- 請勿讓嬰兒或兒童操作。另外，不要站在座位上。
- 請勿將其放置在嬰兒和兒童接觸不到的地方。
- 請勿拆卸、改造本產品。

注意事項 有意外受傷的風險。

※ 使用前

- 改變手把的高度會改變煞車的效果，所以如果調整手把的高度，請參考 **P6如何調整煞車** 來調整煞車。（初始煞車設定是在手柄高度處於最低位置時調整的）
- 檢查產品各部位（特別是手煞車和駐車煞車的有效性，檢查車輪和煞車輪胎支架的磨損情況，檢查車身推動時是否晃動）並確保進行調整。如果框架或任何零件有裂痕、損壞或變形，請勿使用。

※ 使用中

- 最大使用者體重為75公斤。(僅限體重75公斤以下的使用者)
- 袋子的承載能力為10kg。(請勿在座位上放置任何重量超過10公斤的行李，包括頂部的購物籃和放在其中的任何行李。)
- 請勿推有人坐在座位上的座位。
- 請勿將嬰兒、兒童或動物放入購物車或購物袋中。
- 開啟和關閉車輛時，請讓嬰兒和兒童遠離車輛。
- 請將重物放在購物車/包包的底部。
- 請勿在包包內裝有物品的情況下開啟或關閉車輛。
- 請勿將手指放在手把和手煞車桿之間來操作手煞車。
- 請勿踩踏煞車碟盤。如果煞車板被踩踏，煞車板可能會變形或
- 手煞車與汽車煞車的結構不同，所以不要過度相信。
- 請勿踩踏制動板。踩到制動板時，可能會導致板變形或制動線破損，從而導致制動器操作不良。
- 停車煞車接合時請勿推動車輛。
- 折疊車輛時，請注意不要夾到手指。
- 離開車子前請務必使用煞車。
- 請勿在火源附近使用。(樹脂會變形，無法維持其性能)
- 請勿在沙地或泥濘地區使用或放置本產品，尤其是在水坑中。
- 請勿將其用於自行車以外的用途。


※ 使用後 (儲存和保養)

- 避免存放在靠近火源或炎熱潮濕的地方。
- 請勿將其暴露在雨中。(這可能會導致生鏽或變質)
- 清潔或維護產品時，請小心不要被彈簧尖端或其他突出物刮傷。
- 車身受潮時，請用乾布擦拭。
- 請勿用稀釋劑、汽油等有機溶劑擦拭車身、座椅、包包等。
- 用軟布擦去座椅和包包上的污垢。
- 請勿在車架或車輪上留下沙子、泥土等污垢，務必將其擦掉。
- 若長期不使用本產品，請將其清洗乾淨並存放於陰涼處，避免置於高溫、潮濕的地方。此外，如果安裝了駐車煞車，後輪可能會凹陷，因此我們建議將其存放在不安裝駐車煞車時可以自行站立的地方。
- 存放在溫差較大的地方可能會導致座椅/包變色、硬化、車身劣化、故障等。
- 如果車輪或車身發出吱吱聲，請擦去污垢，然後在接頭等部位滴幾滴潤滑油。潤滑後，重複轉動車輪和開關車身2至3次。
- 請勿將其放置在緊急出口、滅火器、消防栓前。
- 定期檢查各零件 (車輪、煞車等) 是否有損壞、鬆脫、磨損等情況，必要時進行調整或更換。
- 定期檢查各部位鉚釘、螺絲有無鬆動。
- 請將使用說明書妥善保管。

※ 關於廢棄

- 請依照各地方政府的指示進行廢棄處理。



各部分名稱

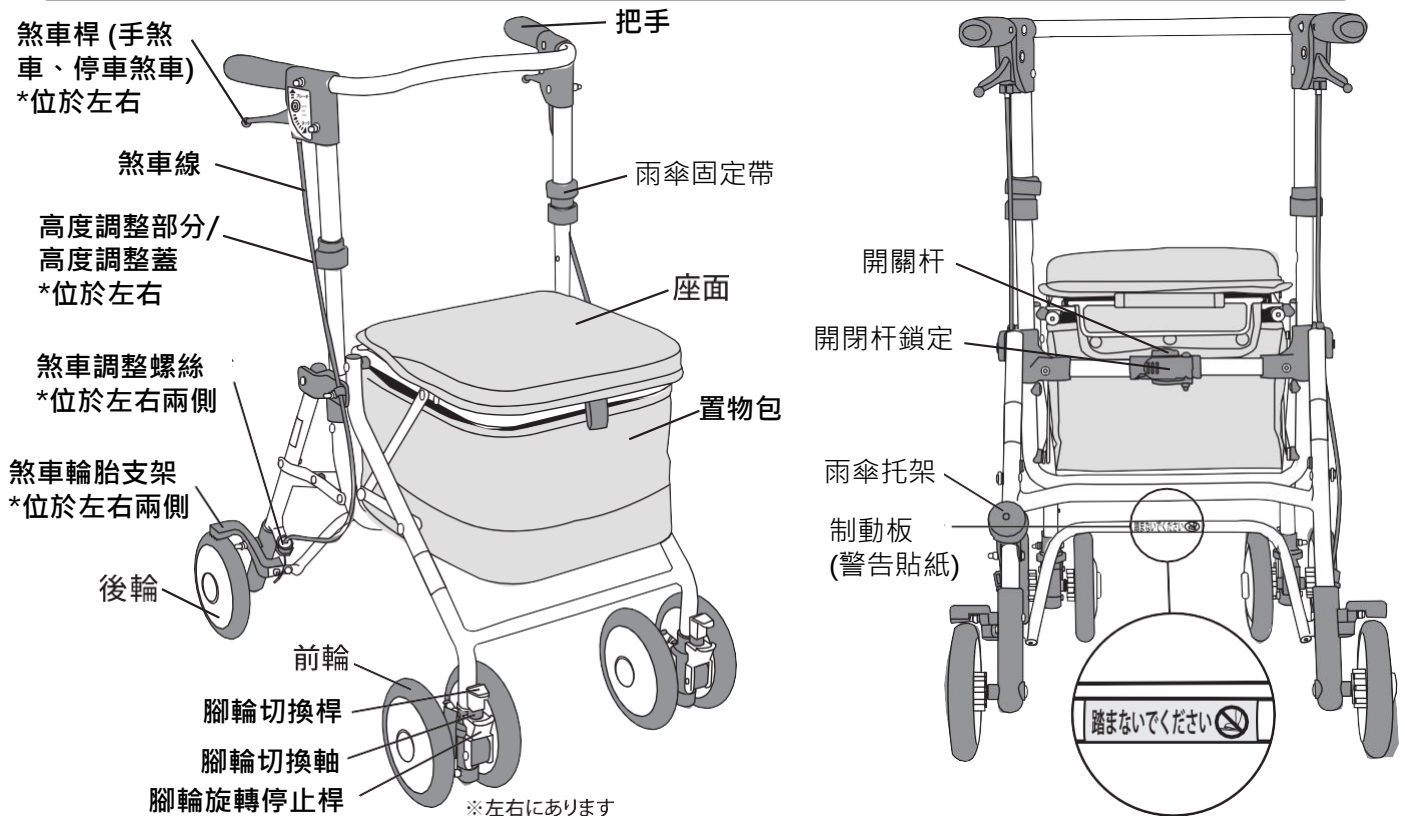

使用時尺寸	約 H79 ~ 88 × W47.5 × D59cm		
儲存大小	約 H71 × W47.5 × D40.5cm	座位尺寸	約 W28 × D30cm
袋子尺寸	約 H18 × W27 × D28cm	座椅高度	約 50cm
包包承載重量	10kg	手把高度調節	4 段階 (約 3cm ピッチ)
最大使用者體重	75kg	重量	約 6kg

如何展開車身


- 請打開開關杆鎖定，解除開關杆的鎖定。(參照圖 ①)
請一邊捏住開關杆，(參照圖 ②)
向圖 ③ 的箭頭方向拉起把手，直至把手不再向上拉。
- 鬆開開關杆，稍微向下移動手柄。發出咔嗒聲，鎖定固定用鎖。(參照圖 ④)
請確認方向盤是否不再向下移動，車身是否在展開的狀態下牢固地固定。
- 請關閉開閉杆鎖定，鎖定開閉杆。(參照圖 ⑤)
請確認開閉杆是否牢牢鎖定(是否處於不捏住的狀態)。

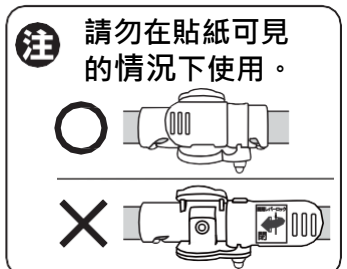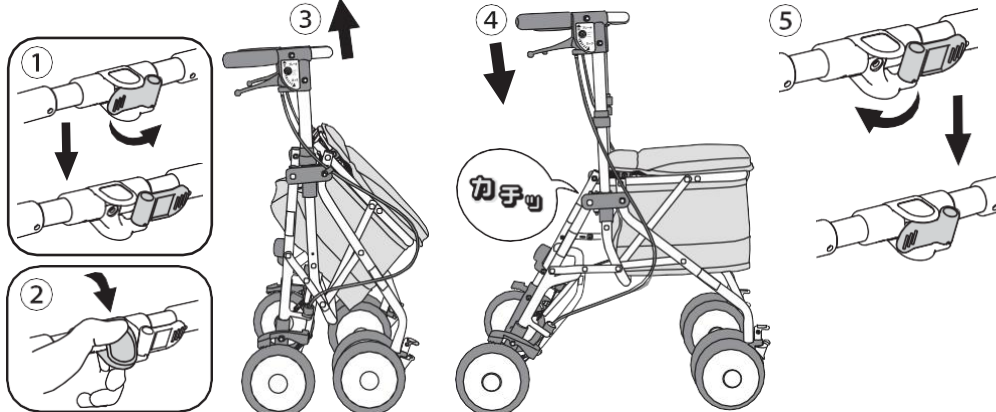


※ 展開車身或摺疊車身時，請務必一邊握住開閉杆一邊上下移動車把。否則鎖定系統可能會損壞車身。

車身折疊方法


1 請打開車身後部中央的開關杆鎖定，解除開關杆的鎖定。(參照圖①)

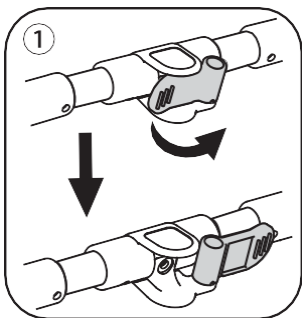

2 一邊按住開關杆(參照圖②)，一邊沿圖③箭頭方向完全放下手柄。

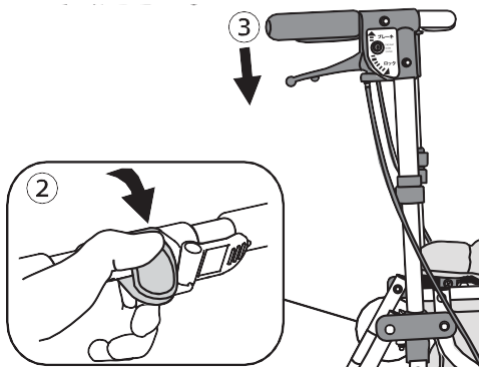

3 請確認車身在摺疊狀態下是否牢固地固定。請關閉開閉杆鎖定，鎖定開閉杆。(參照圖④)

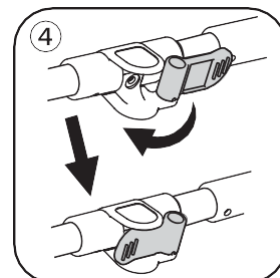


注 為了穩定操作，我們建議您將腳輪保持在固定位置。

手煞車的操作方法

當您擠壓煞車桿時，左後輪和右後輪都會煞車。


- 注**
- 使用手煞車時，同時拉起左、右煞車。如果只安裝一個輪子，另一個輪子可能會旋轉並導致您摔倒。
 - 請勿用手指位於車把和桿之間來操作煞車桿。
 - 由於煞車的結構，它們不像汽車煞車那樣工作，所以不要過於相信。
 - 如果煞車線彎(折)曲，煞車將無法正常工作，因此請更換煞車線。

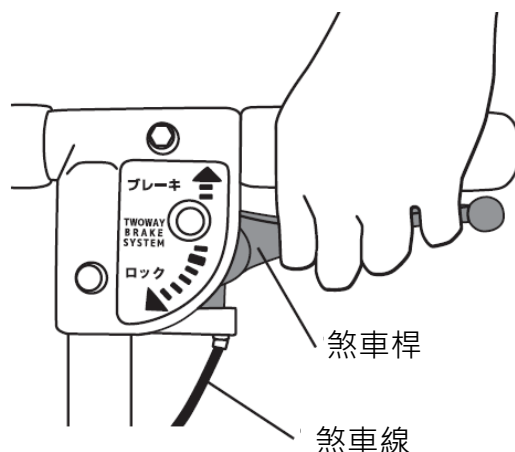

停車煞車的操作方法


停車煞車使用

當下壓煞車桿時，停車止動器會與後輪嚙合。

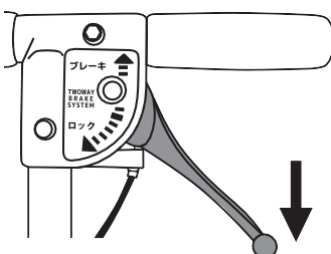

停車煞車解除

當抬起煞車桿時，停車止動器會與釋放後輪。

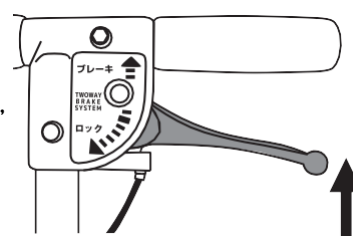

- 注**
- 離開車輛或坐在座椅上時，請務必使用停車煞車。
 - 請勿坐在斜坡上。
 - 請勿在停車煞車下壓（後輪鎖定）的情況下推動車輛。
 - 釋放駐車煞車時，請勿將手指放在手把和煞車桿之間進行操作。（槓桿反彈可能導致受傷。）


如何調整手把高度

1 抬起左右高度調整蓋。

2 取下高度調整插銷。

3 從4個插洞按照您想要的高度，牢牢地插入左右調節插銷固定高度。

4 將左右高度調節蓋子放回原位。

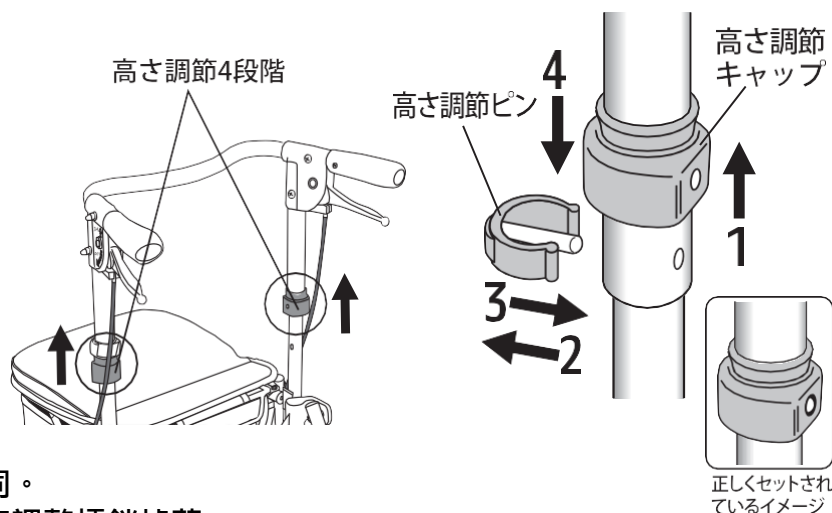


- 注**
- 安裝前請確保左右兩側高度相同。
 - 調整高度時，請小心不要讓高度調整插銷掉落。
 - 請檢查是否有鬆動現象。

座椅的使用方法


使用停車煞車後，慢慢坐在座椅中央，
使您的體重平均分佈在整個座椅上。

- 注**
- 最大使用者體重為75kg。
體重超過75kg的人不能使用。
 - 坐下時，請掛上停車用擋塊，
確認車身處於不動狀態。
 - 請勿坐在斜坡上。
 - 不要坐得太淺或太用力往後靠。
 - 上下移動停車煞車桿時，請注意不要夾住手指。

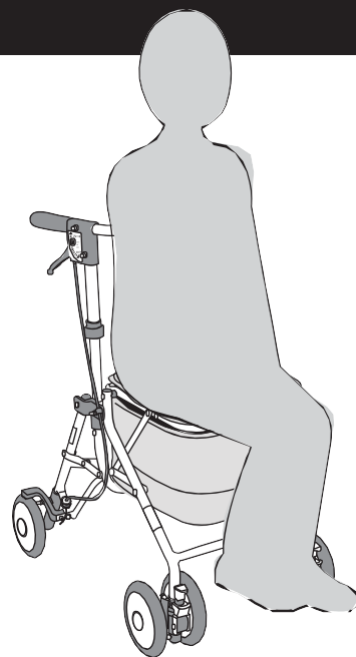

放置購物籃的方法

升起座椅，取出籃架，將籃子卡在籃架中，然後側放。

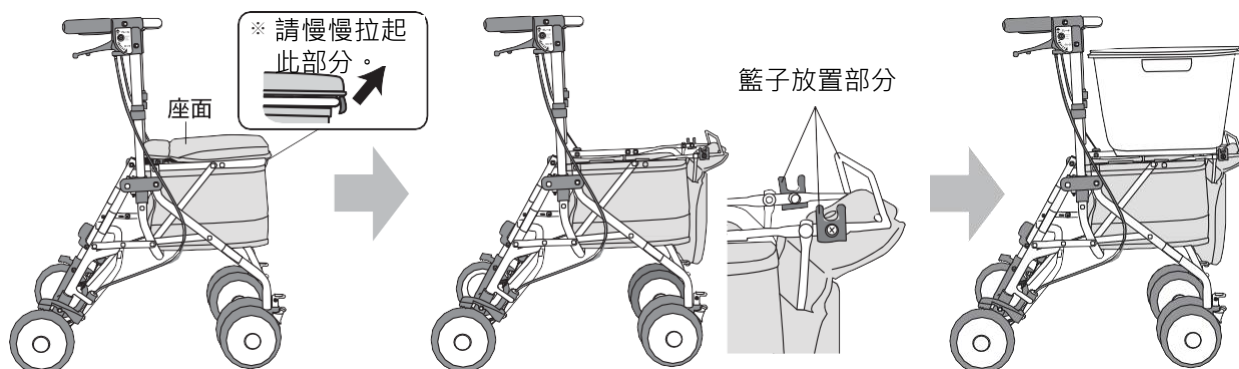

- 注**
- 請將籃子牢固地放置在中央。
(籃子底部尺寸約長40cm x 寬27cm)
 - 如果突然轉彎，可能會失去平衡，導致籃子掉落或車輛翻倒。
 - 使用籃架時，請檢查籃子的尺寸以及籃子是否晃動。
 - 將物品放入籃子時，請將其放在中央。
 - 請勿在超市等店家外使用有籃子的產品。

如何調整煞車

※ 調整時請同時使用左右煞車。


調整後輪與煞車輪胎支架之間的距離約為 2 毫米。

<拉緊煞車>

鬆開A，朝「關閉」方向轉動B進行調整，然後旋緊A。

<鬆開制動器>

鬆開A，將B向「鬆開」方向旋轉調整後，擰緊A。

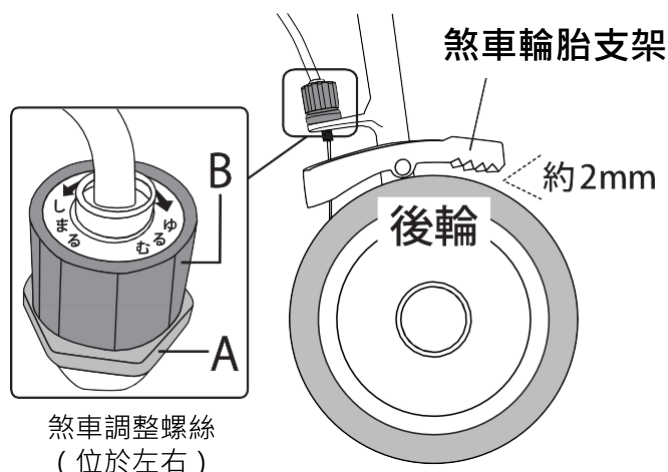

注 調整完畢後，捏緊煞車桿，檢查煞車是否正常。


如何操作三向腳輪

1 <將腳輪的擺動設定為120度(左右各60度)>
在腳輪切換桿下降狀態下
降低腳輪止轉杆。

2 <將腳輪搖頭設定為360度>
在腳輪切換桿升起狀態下
降低腳輪止轉桿。

3 <固定腳輪旋轉裝置>
在腳輪切換桿下降狀態下
升起腳輪止轉杆。

- 注**
- 請確認3WAY(三向)腳輪的設定左右相同。
將腳輪旋轉120度(左右各60度)
 - 將腳輪的旋轉設定為120度(左右各60度)時，
請將腳輪切換軸正確插入孔中。

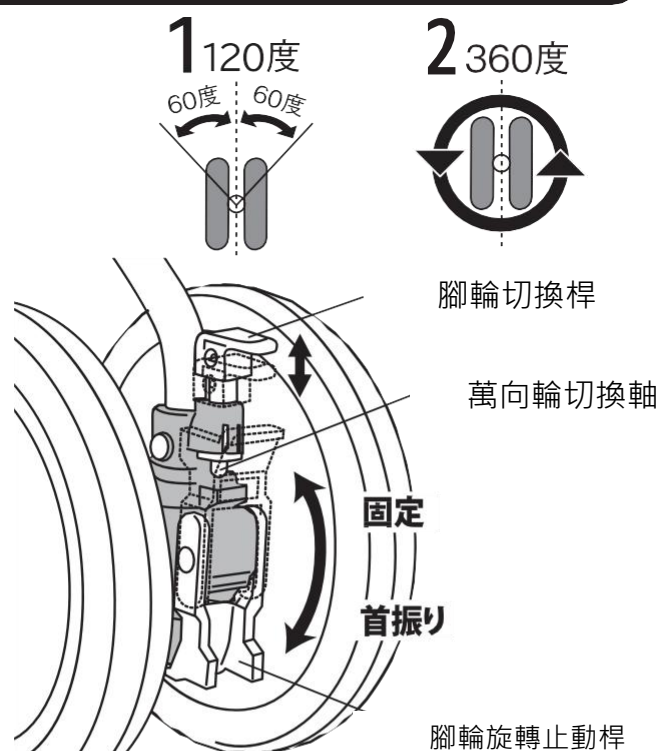


如何收納雨傘和手杖

請拆下雨傘固定帶，將前端插入雨傘托架，纏繞雨傘固定帶進行固定。

注 ● 請將雨傘、手杖牢牢固定在把手的外側。前端直徑為39mm以上傘

● 手杖不能插入雨傘托架。

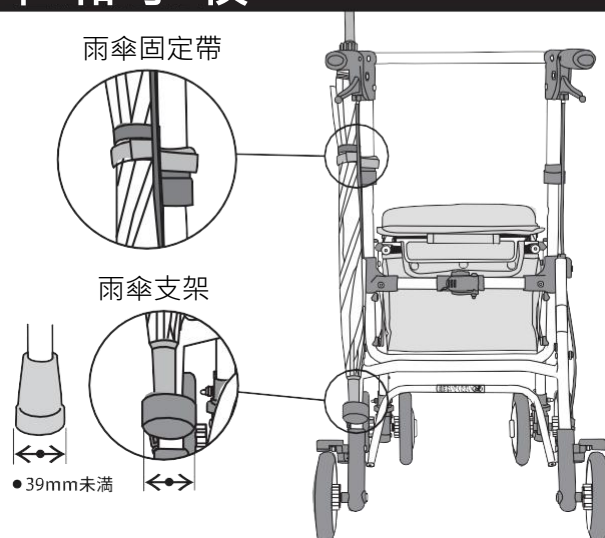

*請注意，規格和外觀如有變更，恕不另行通知。

*使用說明書中使用的插圖是為了使說明更容易理解，因此可能與實際產品略有不同。

MADE IN VIETNAM 24.01